

► Saughaltegriff / Teleskop-Saughaltegriff

Reinigung / Desinfektion

Evtl. Verunreinigungen, die erkennbar sind, sollten sofort entfernt werden, um ein Antrocknen zu vermeiden. Die Reinigung erfolgt am besten mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden, für Kunststoff geeigneten Reiniger oder Seifenlauge. Verwenden Sie keine öligen oder fetthaltigen Substanzen (**Rutschgefahr!**) oder scharfe Reinigungsmittel. Der Saughaltegriff kann bei Bedarf mit einem handelsüblichen, chlorfreien Geratedesinfektionsmittel im Wischdesinfektionsverfahren behandelt werden. **Wichtig:** dabei bitte unbedingt die Anwendungsvorschriften des Herstellers beachten.

⚠ Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die max. Belastbarkeit (60 kg)
- Belasten Sie den Griff nicht mit Ihrem kompletten Körpergewicht
- Den Saughaltegriff ausschließlich für oben beschriebene Zwecke einsetzen
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung die ausreichende Haftung des Griffes, installieren Sie ihn ggf. gem. Gebrauchsanleitung neu
- Setzen Sie den Griff nicht dauerhaft direktem Sonnenlicht aus, um das Gummi der Saugteller nicht zu beschädigen
- Defekte, beschädigte oder nicht ordnungsgemäß installierte Produkte dürfen nicht genutzt werden, bitte ziehen Sie Ihren Fachhändler hinzu
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile
- Den Griff nur mit unverletzter Haut in Berührung kommen lassen!

Garantie

Laut den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen. Von der Garantie ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinflussen. Technische Änderungen und Anbauten sowie unsachgemäße Wartungsarbeiten führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung allgemein.

Wir behalten uns Änderungen vor, die der technischen Verbesserung dienen.



Sundo Homecare GmbH,

Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, www.sundo-homecare.de



H&K International Trade(Trading) Limited, 8F, Building 5, Jinhua Wanda Plaza,
No.107 Guangnan Road, Jindong District, Jinhua, Zhejiang, PR China



Luxus Lebenswelt GmbH, Kochstr. 1, DE- 47877 Willich



WGAV77-1121

sundo
HOMECARE

► Gebrauchsanweisung


Saughaltegriff / Teleskop-Saughaltegriff

Art.-Nr. **17350** / Länge: **32 cm**


Art.-Nr. **17362** / ausziehbar von **56-67 cm**



Befestigung über
Vakuum-Kiphebel

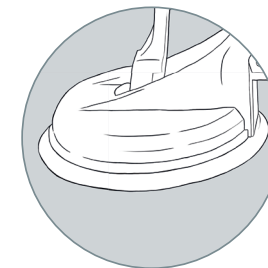

Saugnäpfe: :
12 cm Durchmesser

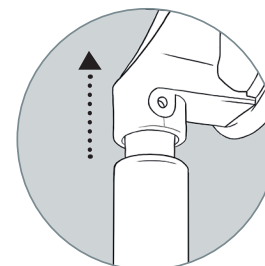

Teleskop Saughaltegriff:
Ausziehbar von
56 bis 67 cm

sundo
HOMECARE

► Saughaltegriff / Teleskop-Saughaltegriff

Verwendungszweck

Der Saughaltegriff ist ein Medizinprodukt. Er dient in erster Linie dem sicheren Halt in Bad, Dusche und WC-Bereich, kann aber auch in allen anderen Räumlichkeiten eingesetzt werden. Er lässt sich auf glatten Flächen werkzeugfrei installieren und rückstandsfrei wieder demontieren.

Indikation

Krankheitsbedingte Kraftminderung/Funktionsbeeinträchtigung der unteren Extremitäten bei noch ausreichender Funktionsfähigkeit der oberen Extremitäten, Gang- und Standunsicherheit

Kontraindikation

Nicht ausreichende Stehfähigkeit, starker Schwindel, nicht ausreichende körperliche oder mentale Fähigkeiten zum Gebrauch des Produkts

Artikelbeschreibung

Saughaltegriffe erleichtern bzw. unterstützen das selbständige Hinsetzen und Aufstehen bzw. Festhalten. Mit Hilfe der Griffe können Personen, die zwar noch Beweglichkeit und Kraft haben, jedoch schon Abstützung und Unterstützung brauchen, weiterhin selbständig Waschbecken, Dusche, Toilette etc. benutzen. **Die Griffe sind jedoch nicht dafür geeignet, das gesamte Gewicht einer Person zu tragen (max. Belastung 60 kg). Bitte wählen sie für diesen Zweck andere, fest mit der Wand verschraubbare Griffe aus.**

Der Griff darf nur mit intakter, unverletzter Haut in Berührung kommen und nicht patientenübergreifend genutzt werden. Eine andere oder darüberhinausgehende Verwendung als die oben genannte ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden und unsachgemäße Montage besteht keine Haftung durch die Sundo GmbH, das Risiko trägt der ausschließliche Verwender. Bei im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretenden schweren Vorkommnissen informieren Sie bitte den Hersteller oder die zuständige Behörde.

Evtl. Ausführungen

Es gibt 2 unterschiedliche Modelle, die geeignete Auswahl obliegt dem Fachpersonal und richtet sich nach den Bedürfnissen und dem Einsatzort.

Vor Benutzung / Wartung

Lesen Sie sich zunächst die vorliegende Gebrauchsanleitung komplett durch und bewahren Sie diese mit der Verpackung bis zum Ende der Produktlebensdauer auf. Bitte überprüfen Sie vor dem Erstgebrauch und jeder Nutzung durch Sichtprüfung, ob das Produkt unbeschädigt ist. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch auch die sichere Befestigung des Griffes. Sofern die Haftung nicht gegeben bzw. nicht ausreichend ist, bitte den Griff gem. Montageanleitung lösen und erneut anbringen. Die Saugteller regelmäßig auf Verschleiß überprüfen. Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß darf der Haltegriff nicht (mehr) genutzt werden. Eine weitere Wartung ist nicht erforderlich.

Montage

Der Artikel darf nur von autorisiertem, geschultem Fachpersonal montiert werden. Suchen Sie als erstes einen geeigneten Anbringungsort für den Saughaltegriff aus. Der Untergrund muss glatt, trocken, fettfrei und sauber sein. Der Saugteller muss komplett auf dem Untergrund aufliegen können, ohne dass z.B. eine Fuge o.ä. durch die Auflagefläche geht. Die Saugteller sollten mindestens 1,5 cm von Fugen oder Kanten entfernt angebracht werden. Reinigen Sie dazu zunächst sorgfältig und gründlich den für die Montage vorgesehenen Untergrund und die Saugteller des Griffes. Die Befestigungshebel zeigen dabei nach innen in Richtung Griffstange. Setzen Sie nun den Griff auf den ausgewählten Befestigungsort, und drücken Sie die Befestigungshebel zur Fixierung des Griffes nach außen. Durch den entstehenden Unterdruck ist der Hebel nur mit einem gewissen Kraftaufwand herunterzudrücken. Je größer der Widerstand ist, desto besser wird die Haftung des Griffes sein. Ist keine ausreichende Haftung gegeben, darf der Griff nicht genutzt, sondern muss gelöst und erneut angebracht werden!

Zusatz bei Art.nr. 17362, Teleskop-Haltegriff:

Entnehmen Sie die Einzelteile aus dem Karton und verbinden Sie die Saugteller mit dem Griffstück, in dem Sie das Griffteil in das Aufnahmerohr des Saugtellers schieben. Achten Sie darauf, dass der silberne Knopf in der dafür vorgesehenen Öffnung hör-, spür- und sichtbar einrastet bzw. austritt. Verfahren Sie mit dem zweiten Saugteller in gleicher Weise. Die Länge des Griffes kann durch Ausziehen bzw. Zusammenschieben bestimmt werden und bleibt nach Anbringung erhalten.

Demontage

Drücken Sie den Befestigungshebel des Saughaltegriffes zurück in Richtung Haltestange. Fahren Sie dann vorsichtig mit den Fingerspitzen unter den Saugteller und heben ihn an. Verfahren Sie mit dem zweiten Saugteller genauso. Achtung, den Griff dabei festhalten!

Technische Daten

Art.-Nr. 17 350 / Saughaltegriff Art.-Nr. 17 362 / Teleskop-Saughaltegriff			
Material:	ABS-Kunststoff, Gummi, Edelstahl	Griffabstand zur Wand:	ca. 3,5 cm
Farbe:	weiß	Lebensdauer:	5 Jahre
Gesamtlänge:	17 350 32 cm 17 362 56 - 67 cm		
Griffbereich:	ca. 30-44 cm		

Cleaning/Disinfection:

Any impurities that are recognizable should be removed immediately to avoid drying. Cleaning is best done with a damp cloth and mild plastic cleaner or soapy liquor. Do not use oily or fatty substances (risk of slipping!) or sharp abrasives. If necessary, the suction handle can be treated with a commercially available, chlorine-free device disinfectant in the wipe sanitizer procedure. Important: please observe the manufacturer's application regulations.

⚠ Safety instructions

- Note the maximum load capacity (60 kg)
- Do not strain the handle with your complete body weight
- Use the suction handle exclusively for purposes described above
- Before each use, check the sufficient adhesion of the handle, install it again, if necessary, in accordance with the user manual
- Do not permanently expose the handle to direct sunlight so as not to damage the rubber of the suction cups
- Defective, damaged or improperly installed products must not be used, please consult your reseller
- Use only original spare parts
- Let the handle only come into contact with uninjured skin!

Warranty

According to the statutory warranty claims. Excluded from the guarantee are defects resulting out of natural wear and tear, intent, negligence or improper handling or use and defects which affect the value or usability of the tool only insignificantly.

We reserve the right of modifications serving the technical improvement.


Suction Cup Grab Bar / Telescopic Suction Cup Grab Bar

Item no. 17 350 / Length: 32 cm


Item no. 17 362 / telescopic from 56-67 cm



Attachment with vacuum lever

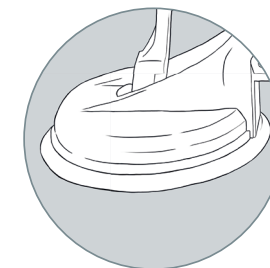

Rubber suction cup: diameter 12 cm

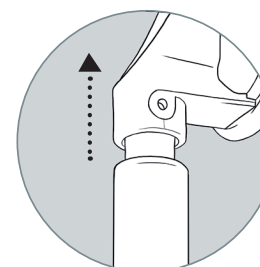

Telescopic Suction Cup Grab Bar: Adjustable from 56 to 67 cm

Sundo Homecare GmbH,
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, www.sundo-homecare.de

H&K International Trade(Trading) Limited, 8F, Building 5, Jinhua Wanda Plaza,
No.107 Guangnan Road, Jindong District, Jinhua, Zhejiang, PR China

EC REP Luxus Lebenswelt GmbH, Kochstr. 1, DE- 47877 Willich



► Suction Cup Grab Bar / Telescopic Suction Cup Grab Bar

Intended Use

The Suction Cup Grab Bar is a medical device. It is primarily used for safe hold in the bathroom, shower and toilet area, but can also be used in all other rooms. It can be installed on smooth surfaces without tools and dismantled without residue.

Indication

Disease-related loss of strength/functional impairment of the lower extremities with sufficient functioning of the upper extremities, gait and stand-up uncertainty

Contraindication

Insufficient standing capacity, dizziness, insufficient physical and/or mental ability for use

Description

Suction bars facilitate or support the independent sitting down and getting up or holding tight. With the help of the handles, people who still have mobility and strength, but already need support, can continue to use washbasins, showers, toilets etc. independently. Please note that the suction handles are not suitable to carry the entire weight of a person (max. load 60 kg). For this purpose please select other handles that can be screwed to the wall. The bar must only come into contact with intact, uninjured skin. Any use other than that mentioned above is not intended. Sundo GmbH is not liable for the resulting damages and improper assembly, the risk is borne exclusively by the user. In the event of serious incidents related to this product, please inform the manufacturer or the competent authority.

Versions

Two different lengths are available (one adjustable in length), the appropriate selection is the responsibility of the specialist staff and depends on the needs and the location.

Before use / Maintenance

First, read the present instruction for use completely and keep it together with the packaging until the end of the product life. Please check if the product is undamaged before first and any use by visual inspection. Before each use, also check the secure attachment of the handle. If the liability is not given or is not sufficient, please loosen the handle according to the assembly instructions and reattach it. Check the suction plates regularly for wear. In case of signs of damage or wear, the handle must not be used (any more). No further maintenance is required.

Assembly

The product must be assembled by authorized, trained personnel. First, select a suitable location for the Suction Cup Grab Bar. The surface must be smooth, dry, grease-free and clean. The suction plate must be able to lie completely on the surface without, for example, a tile joint or similar passing through the support surface. The suction plates should be attached at least 1.5 cm away from joints or edges. To do this, first carefully and thoroughly clean the surface intended for assembly and the suction plates of the handle. The fastening levers point inwards towards the bar. Now place the Suction Cup Grab Bar on the selected mounting location and press the mounting levers outwards to fix the handle. Due to the resulting vacuum, the lever can only be pushed down with a certain amount of effort. The greater the resistance, the better the adhesion of the handle will be. If there is insufficient liability, the handle must not be used, but must be loosened and reattached!

Addition to item no. 17362, Telescopic Suction Cup Grab Bar

Remove the individual parts from the carton and connect the suction plates to the bar by pushing the handle part into the suction plate's receiving tube. Make sure that the silver button in the designated opening is audibly, visibly and noticeably snapped in / appears. Proceed in the same way with the second suction plate. The length of the handle can be determined by pulling out or pushing together and is preserved after attachment.

Dismantling

Push the mounting lever of the suction handle back towards the holding rod. Then carefully slide your fingertips under the suction plate and lift it. Do the same with the second suction plate. Attention, to prevent the handle from falling hold it firmly at the same time.

Technical data

Item no. 17 350 / Suction Cup Grab Bar Item no. 17 362 / Telescopic Suction Cup Grab Bar			
Material:	ABS, rubber, stainless steel	Handle distance to the wall:	approx. 3,5 cm
Color:	white	Lifespan:	approx. 5 years
Total length:	17 350 32 cm 17 362 56 - 67 cm		
Grip area:	approx. 30-44 cm		